



## EzRay Vet<sub>MT</sub> Carro

### Carro móvil de rayos X intraorales



- Acelera sus procedimientos de tratamiento dental.
- Proporciona un flujo de trabajo sin problemas
- Minimiza los riesgos de anestesia o lesiones por contención.





### Adquiera imágenes claras con un Punto focal de 0,4 mm

Independientemente del sensor intraoral que utilice, EzRay Air minimiza el desenfoque y proporciona un valor diagnóstico adicional con un punto focal de 0,4 mm.

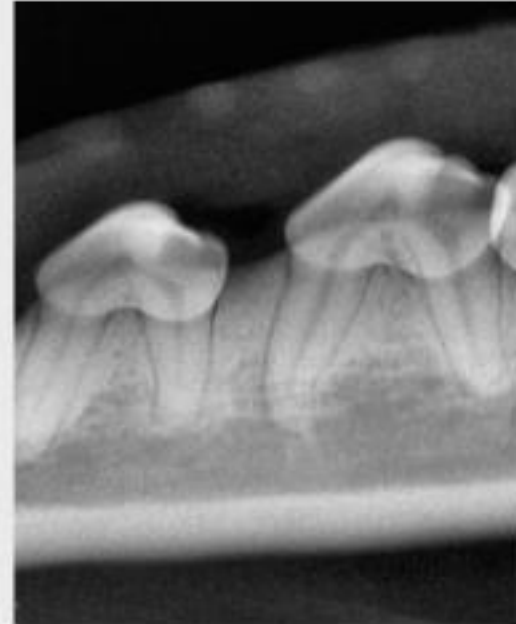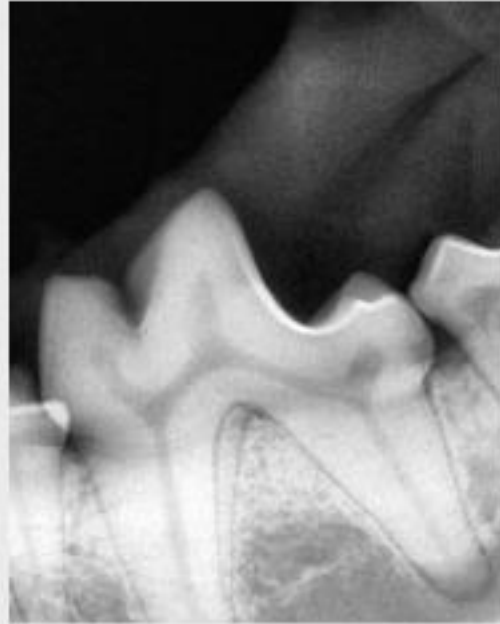

### Diseño ergonómico por seguridad y eficiencia



## Ligero




El cabezal de tubo liviano de 5,6 libras hace que sea fácil de manipular y posicionar, lo que produce un flujo de trabajo más rápido.



## Angulaciones inteligentescompensación de exposición

La adquisición de imágenes de ciertas áreas de la boca, como el maxilar rostral y caudal o la mandíbula rostral, es difícil debido a la superposición de una estructura sobre un área de interés o a la difícil colocación del sensor. Cuando no se pueden utilizar técnicas de imágenes paralelas, el cabezal del tubo debe angularse adecuadamente para capturar estas imágenes. Los radiografistas no suelen modificar la configuración de exposición, por lo que la calidad de la imagen varía debido a esta angulación. El EzRay Vet Cart puede optimizar la configuración de exposición de la imagen según el ángulo del cabezal del tubo.

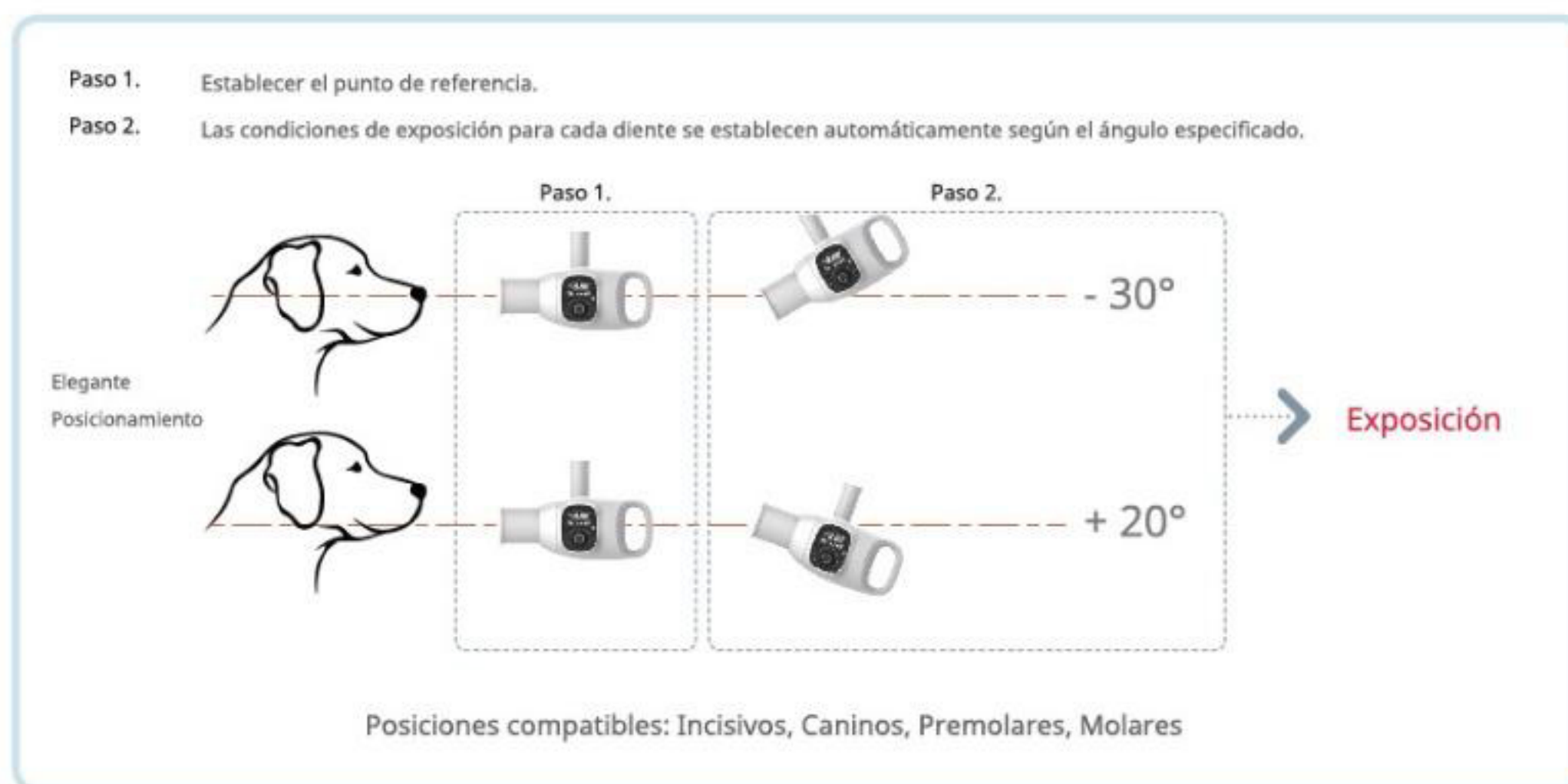

## Marcación inteligentepara todas las funciones

El panel de control ubicado en el cabezal del tubo simplifica y agiliza el flujo de trabajo. El dial inteligente reúne todos los ajustes en un solo dial, lo que agiliza el flujo de trabajo y reduce el tiempo de preparación. Olvídate de recordar complicados botones y configuraciones del panel de control.



# Carro móvil de rayos X intraorales con tecnología de rayos X de nanotubos de carbono obtener imágenes diagnósticas de alta calidad

## PRESUPUESTO

|                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punto focal                        | 0,4 mm (IEC 60336)                                                                                                                             |
| Voltaje del tubo (kV)              | 65 kV                                                                                                                                          |
| Corriente (mA)                     | 3,0 mA                                                                                                                                         |
| Rango de tiempo de exposición      | 0,05 ~ 0,5 (incremento de 0,01 s)                                                                                                              |
| Distancia de la fuente a la piel   | Mínimo 7,9 pulgadas (200 mm)                                                                                                                   |
| Campo de rayos X                   | Por defecto :2,4 pulgadas (60 mm) redondo, 1,2 x 1,6 pulgadas (30 x 40 mm) rectangular<br>Opcional:0,8 x 1,2 pulgadas (20 x 30 mm) Rectangular |
| Longitud del arco del brazo [máx.] | 56,9 pulgadas (1444 mm)                                                                                                                        |
| Accesorios                         | Interruptor de exposición remota                                                                                                               |
| Altura                             | 74,5 pulgadas (1893 mm)                                                                                                                        |
| Ancho                              | 26 pulgadas (660 mm)                                                                                                                           |
| Peso                               | Aproximadamente 126 libras (57 kg)                                                                                                             |
| Altura del soporte del carrito     | 45,8 pulgadas (1155 mm)                                                                                                                        |
| Longitud del brazo                 | 28,2 pulg. (716 mm), 29,3 pulg. (738 mm) - (incluidas las juntas)                                                                              |

\* Las especificaciones están sujetas a



**ORIOI CHIMENO**  
Comercial

 666521052  
 oriol@oservis.es



 [www.oservis.es](http://www.oservis.es)  
 [oservisveterinaria](#)  
 PG. Lola Anglada, 18 Local 3  
08228 Les Fonts de Terrassa

EzRay Vet™ Cart



Rayence y MyVet Inc.  
81 Ruckman Rd. Unidad A, Closter, NJ 07624  
Teléfono: 201.561.0223 Fax: 201.585.0293  
[información@myvetimaging.com](mailto:información@myvetimaging.com) [www.myvetimaging.com](http://www.myvetimaging.com)